


Taleo 1C50

Klar til hverdagslivet.

Taleo er udviklet til aktive personer, som bevæger sig rundt i forskellige indendørs og udendørs miljøer, og som sætter stor pris på at kunne gå ubesværet rundt og deltage i alle livets aspekter.

Designet med henblik på en optimal funktion:

- Dobbeltfjedre og en lang kulfiberbund giver mulighed for en jævn rullebevægelse og effektiv udnyttelse af energien ved forskellige hastigheder
- Den unikke, fleksible tilslutning af kulfiberfjedrene i forfoden medfører en optimal tilpasning til forskellige underlag
- Justerbar støddabsorbering med tre forskellige hælkliler
- Tåler fersk-, salt- og klorvand og har afløbskanaler på tilslutningsadapteren og drænhuller i fodkosmetikken
- Kosmetikken er kompatibel med en smal tilslutningsadapter
- Kompatibel med Ottobocks mikroprocessorstyrede knæled

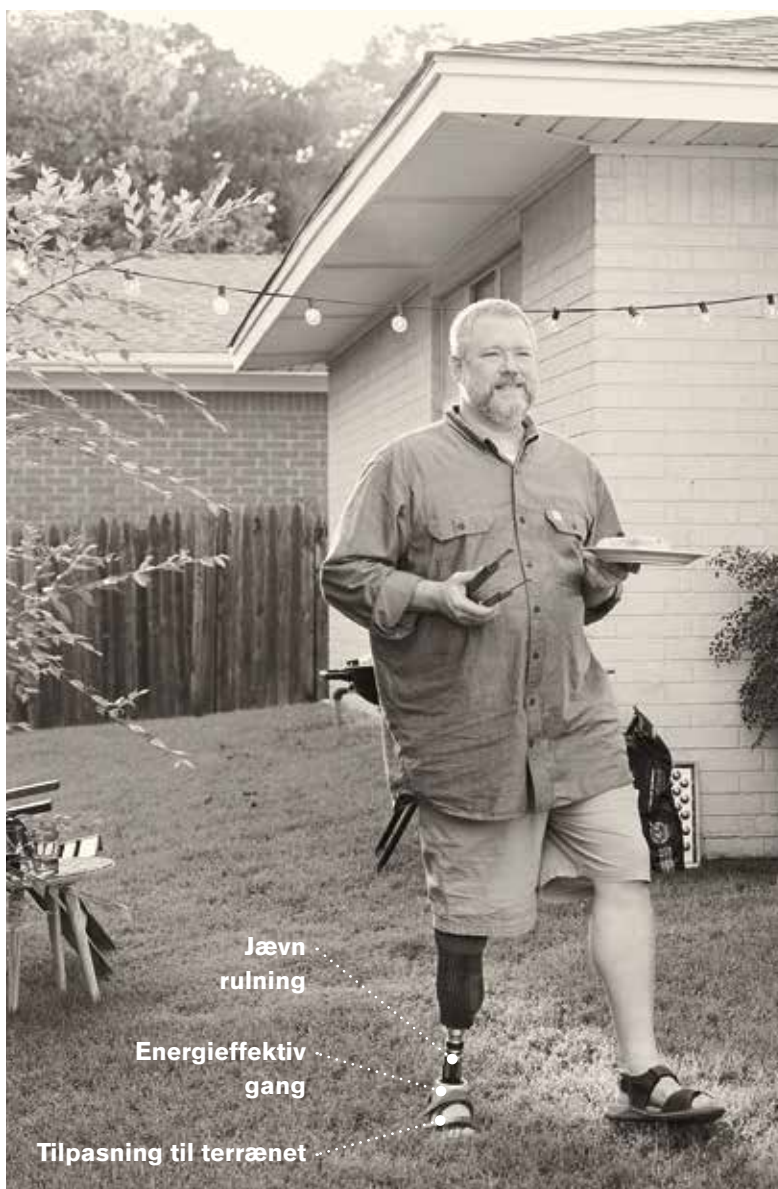

Tekniske data

Mobilitetsniveau	MG 3-4
Maks. kropsvægt	150 kg
Størrelser	22-30 cm
Fodkosmetik	Smal form med en hælhøjde på 15 ± 5 mm (str. 22-25 cm) Normal form med en hælhøjde på 10 ± 5 mm (str. 24-30 cm)
Vægt uden fodkosmetik*	450 g
Vægt med normal fodkosmetik*	690 g
Byggeøjde	150 mm (med normal fodkosmetik*)

*Referencestørrelsen er 26 cm.



1C50 Taleo

ottobock.

Bestillingsoplysninger

Valg af fjederstivhed i forhold til

1 kropsvægt og aktivitet samt

Kropsvægt [kg]	Normal aktivitetsniveau	Høj aktivitetsniveau
Op til 51	1	2
52-58	2	3
59-67	3	4
68-77	4	5
78-88	5	6
89-100	6	7
101-115	7	8
116-130	8	9
131-150	9	-

2 fodstørrelse

Stivhed Fodstørrelse	Stivhed								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22									
23									
24									
25									
26								**	
27	-	-						**	**
28	-	-						**	**
29	-	-					**	**	**
30	-	-					**	**	**

Smal fodkosmetik (hælhøjde på 15 ± 5 mm)
 Begge typer fodkosmetik
 Normal fodkosmetik (hælhøjde på 10 ± 5 mm)

** Denne konfiguration må ikke kombineres med et 3C88-3 C-Leg eller et 3C98-3 C-Leg.

Eksempel på en bestilling







1C50=R26-4-P/4N

Artikelnr.	Side	Størrelse	Stivhed	P /	Farve	Form
1C50=				P /		
	Side	Str. [cm]	Farve		Form	
	Højre R	22, 23, ..., 30	Beige 4		Smal 22-25 cm S	
	Venstre L		Lysebrun 15		Normal 24-30 cm N	



Leverancen omfatter 1C50 fodmodul, 2C15 fodkosmetik inkl. tilslutningskappe, 2F50 hækilesæt (bestående af tre forskellige grader af hårdhed) og en sort Spectra-sock.

Anbefalede kombinationer ***

TT	TF
 <p>4R220*DVS + 6Y94=*-F delvist dækket DVS liner og 453A30 ProFlex Plus knæhylster</p>	 <p>7T451=1 SiOCX TF Pro; 6Y110 Skeo Sealing liner og 21Y21 ClickValve</p>
 <p>4R10=111 Quickchange</p>	 <p>3C98* C-Leg 3B1* Genium 3B5* Genium X3</p>
	 <p>4R57=WR vandtæt rotationsadapter</p>
	 <p>3F1=1 + 99B120=* Functional Cosmesis til C-Leg 4 3F1=2 + 99B120=* Functional Cosmesis til Genium</p>

*** Alle komponenter sælges separat og er tilgængelige som Ottobock-produkter, der er kompatible med protese fod 1C50 Taleo, hvilket er med til at sikre en optimal funktion. Bandagisten skal vælge komponenter baseret på individuelle patientkriterier.